
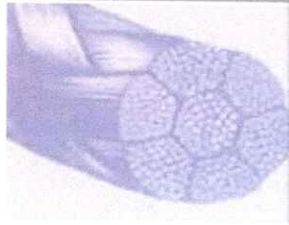


## FICHA TECNICA

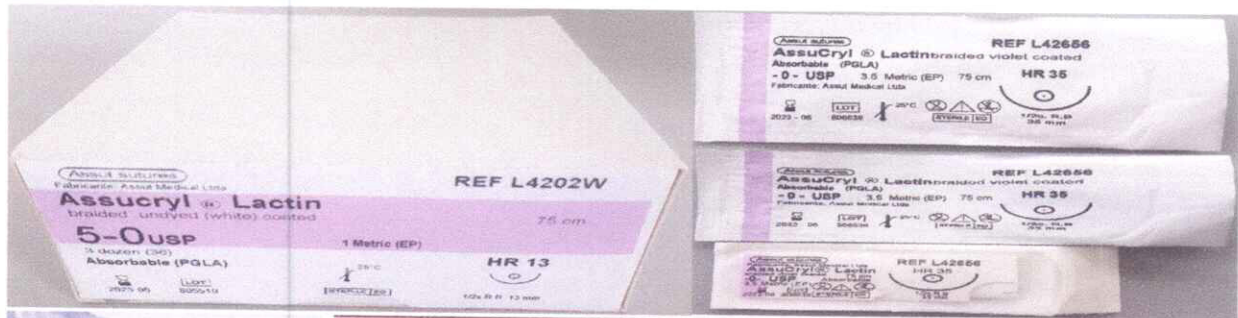

### ASSUCRYL® LACTIN trenzado, violeta, cubierto, sintético absorbible

Trenzado, con revestimiento sintético absorbible PGLA. Previsible absorción del tiempo. Alta resistencia a la tensión inicial. Facilidad y seguridad al anudar. Excelente nudo deslizando, suave de manejar. Violeta y blanco. Absorción esencialmente completa entre 60 y 90 días.

Nombre del producto	AssuCril® Lactin Sintético Absorbible
Fabricante	Assut Medical Ltda,
Ubicación del fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Sutura Sintética absorbible Cubierta, Estéril
Color	Teñidas violeta con aditivos D+C violeta # 2 (CI 60725) aprobados por la FDA o sin teñir
Composición Química	Poly (glycolide-co-L-Lactide, PGLA), un copolimero de glycolide y L-Lactide (90/10, Glacomer 91)
Revestimiento	glycolide y L-Lactide (Glacomer 37) y calcium stearate
Características Generales	AssuCril® Lactin no es antigénica ni pirogenica AssuCril® Lactin trenzado cumple con los requerimientos de la Farmacopea Europea (EP) "Suturas Estériles Sintéticas Absorbibles" y la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para "Sutura Quirúrgica Absorbible"
Aplicación	La sutura de AssuCril® Lactin trenzada es destinados para el uso en general de tejidos blandos aproximación y / o ligadura, incluido el uso en la cirugía oftálmica, la anastomosis del nervio periférico y la microcirugía de los vasos e menos de 2 mm de diámetro. La evaluación en la seguridad y eficacia para el uso en procedimientos cardiovasculares y neurológicas aun no ha finalizado
Absorción	AssuCril® Lactin trenzado retiene aproximadamente el 65% de su fuerza tensil después de 2 semanas de la implantación. La absorción del AssuCril® Lactin trenzado se completa entre 60 y 90 días
Reacción en Piel / Tejido	Moderado
Esterilidad	Con Gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Primer Empaque: 1 sobre fabricado en Tyvek PET//PE Tyvek Segundo Empaque: 1 sobre de Aluminio
Tamaños	USP 6-0 hasta 2
Vida Útil	5 años
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Almacenamiento	Manténgase en un lugar fresco y seco
Otros	Assut ASSUCRYL® Lactin está disponible en diferentes en diferentes grosores y largos con aguja en Acero inoxidable de varios tipos y medidas. Ver el catálogo general "Assut sutures", L42656 ASSUCRYL LACTIN 0 HR-35 75cm, L42656N ASSUCRYL LACTIN 0 HR-35 90cm, L43366 ASSUCRYL LACTIN 0 HRG-35 75cm, L43366N ASSUCRYL LACTIN 0 HRG-35 90cm, L42657 ASSUCRYL LACTIN 1 HR-35 75cm, L42657N ASSUCRYL LACTIN 1 HR-35 75cm, L43367 ASSUCRYL LACTIN 1 HRG-35 75cm, L43367N ASSUCRYL LACTIN 1 HRG-35 90cm, L4277N ASSUCRYL LACTIN 1 HR-38 90cm, L4347 ASSUCRYL LACTIN 1 HRG-38 75cm, L4347N ASSUCRYL LACTIN 1 HRG-38 90cm, L4275 ASSUCRYL LACTIN 2/0 HR-38 75cm, L4345N ASSUCRYL LACTIN 2/0 HR-38 90cm, L4345 ASSUCRYL LACTIN 2/0 HRG-38 75cm, L4345N ASSUCRYL LACTIN 2/0 HRG-38 90cm, L43365 ASSUCRYL LACTIN 2/0 HRG-35 75cm, L43365N ASSUCRYL LACTIN 2/0 HRG-35 90cm, L42455 ASSUCRYL LACTIN 2/0 HR-25 75cm, L42454 ASSUCRYL LACTIN 3/0 HR-25 75cm, L42454N ASSUCRYL LACTIN 3/0 HR-25 90cm, L42654 ASSUCRYL LACTIN 3/0 HR-35 75cm, L42654N ASSUCRYL LACTIN 3/0 HR-35 90cm, L4274 ASSUCRYL LACTIN 3/0 HR-38 75cm, L42453 ASSUCRYL LACTIN 4/0 HR-25 75cm, L4253 ASSUCRYL LACTIN 4/0 HR-27 75cm, L4233 ASSUCRYL LACTIN 4/0 HR-17 75cm, L4232 ASSUCRYL LACTIN 5/0 HR-17 75cm, L4201W ASSUCRYL LACTIN BLANCO 6/0 HR-13 75cm.

Firma Director Técnico: